

CRIMPTRONIC CR-6000**Station de sertissage électronique automatique robotisée**


*Entièrement programmable avec un large choix de têtes.
Montage/démontage rapide des têtes.
Sertissage ultra rapide des flacons directement dans les portoirs.
Espace de travail sécurisé par des barrières infrarouge*

**Station de sertissage**

Notre station de sertissage CR-6000 allie l'ajustage précis de la force avec un sertissage ultra rapide et reproductible, directement dans les portoirs de flacons.

- Adapté pour tous les modèles de fermetures du marché.
- Station à 3 axes, ergonomique et facile d'usage.
- Recommandée pour la préparation intensive d'échantillons.
- Alimentation intégrée.
- Compteur/totalisateur.
- Ecran couleur tactile.
- Surface de travail éclairée par LED et sécurisé par des barrières IR.
- Fiable et robuste.
- Ultra rapide et très précise.
- Fabrication française.

Nous offrons maintenant une nouvelle station de sertissage électronique à hautes performances. Elle est polyvalente, stable, et permet d'ajuster avec précision la force de sertissage. Le sertissage s'effectue directement sur le portoir de flacons. Les têtes interchangeable pour le sertissage se montent rapidement sans outils et sont spécialement adaptées pour le sertissage de capsules en aluminium et en acier inoxydable avec un diamètre 8, 11, 13 et 20 mm. Des têtes spéciales sont disponibles pour des capsules flip-off de 13 et 20mm. Le CR-6000 est très rapide et précis. Les dimensions sont les suivantes : (56 x 42,5 x 49 cm, H x L x P).

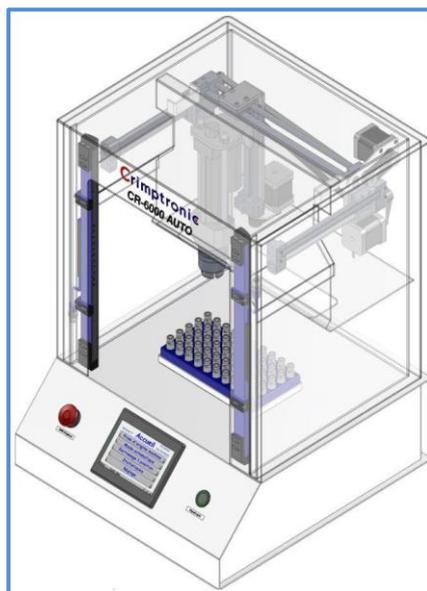

Le réglage de la force peut être ajusté de manière progressive sur le display en fonction de la dureté des joints et du type de capsules employées. Le CR-6000 est compatible avec des capsules standards en aluminium, des capsules de sécurité utilisées en Headspace, les capsules magnétiques en tôle d'acier ainsi que les capsules flip-off. Le système permet le sertissage complet de toutes les positions du portoir ou le sertissage prioritaire des flacons sélectionnés. L'utilisation ne nécessite qu'une prise d'alimentation électrique de 230V/50Hz.



43, rue des Violettes ♦ 68390 SAUSHEIM ♦ France

Tél. 03 89 45 62 16 ♦ Fax 03 89 45 63 90 ♦ E-mail : a.europe@wanadoo.fr ♦ www.actioneurope.fr

ACTION EUROPE développe et commercialise des appareils scientifiques pour le domaine de la chromatographie. Une expérience de plus de 20 ans nous permet de vous conseiller efficacement dans le cadre de la recherche de vos équipements de laboratoire, le développement de méthodes et l'analyse de service.

Caractéristiques & avantages

- Sertissage ultra rapide, reproductible et sécurisé directement dans les portoirs de flacons.
- Sertissage sécurisé et reproductible par simple pression du bouton *départ cycle*.
- Parfaitement adapté pour le sertissage de capsules en aluminium ou capsules magnétiques en tôle d'acier.
- Force ajustable de manière graduelle en fonction du type de capsules et de la dureté des joints.
- Changement du type de tête facile et rapide sans l'utilisation d'outils.
- Espace de travail éclairé et sécurisé à l'aide de barrières infrarouge.
- Ne nécessite pas l'utilisation d'air comprimé ou le chargement d'accu électrique.
- Ne refoule pas d'air contaminé par des traces d'huiles ou d'hydrocarbures dans la zone de travail confinée.
- Remplacement du vérin électrique simple et rapide.
- Fabrication sur mesure en fonction des besoins du client, sur demande.

Informations de commande

Description	Quantité	Nr. Cat.
Station de sertissage électronique à hautes performances Modèle Crimptronic CR-6000 (Station complète sans tête de sertissage)	1	CR-6000
Station de sertissage électronique à hautes performances pour capsules de 11mm Modèle Crimptronic CR-6000 (Station complète avec têtes de sertissage pour capsules de 11mm)	1	CR-6000-11K
Station de sertissage électronique à hautes performances pour capsules de 20mm Modèle Crimptronic CR-6000 (Station complète avec têtes de sertissage pour capsules de 20mm)	1	CR-6000-20K

Accessoires

Description	Quantité	Nr. Cat.
Tête de sertissage avec système de guidage pour flacons à sertir avec un col de Ø 8mm	1	TS 08 S
Tête de sertissage avec système de guidage pour flacons à sertir avec un col de Ø 11mm	1	TS 11 S
Tête de sertissage avec système de guidage pour flacons à sertir avec un col de Ø 13mm	1	TS 13 S
Tête de sertissage avec système de guidage pour capsules de Ø 13mm flip-off	1	TS 13FLO S
Tête de sertissage avec système de guidage pour flacons à sertir avec un col de Ø 20mm	1	TS 20 S
Tête de sertissage avec système de guidage pour capsules de Ø 20mm flip-off	1	TS 20FLO S
Système de transport, guidage et positionnement électrique pour le montage automatique des capsules <i>Précisez la taille des capsules à la commande</i>	1	CT-6000



43, rue des Violettes ♦ 68390 SAUSHEIM ♦ France

Tél. 03 89 45 62 16 ♦ Fax 03 89 45 63 90 ♦ E-mail : a.europe@wanadoo.fr ♦ www.actioneurope.fr

ACTION EUROPE développe et commercialise des appareils scientifiques pour le domaine de la chromatographie. Une expérience de plus de 20 ans nous permet de vous conseiller efficacement dans le cadre de la recherche de vos équipements de laboratoire, le développement de méthodes et l'analyse de service.